


# Portoir de **prélèvement**




Portoir de sac 100 ml

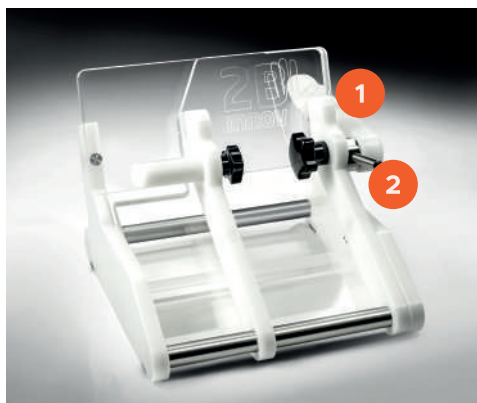

1 - Levier Verrouillage  
Déverrouillage


2 - Réglage volume  
100 ml / 250ml

Portoir de sac 250 ml

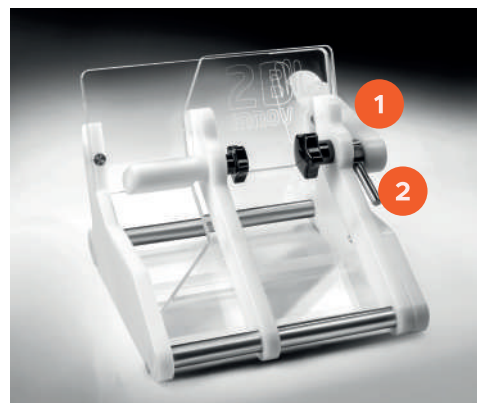

3 - Zone pipetage

4 - Réglage  
ouverture de sac

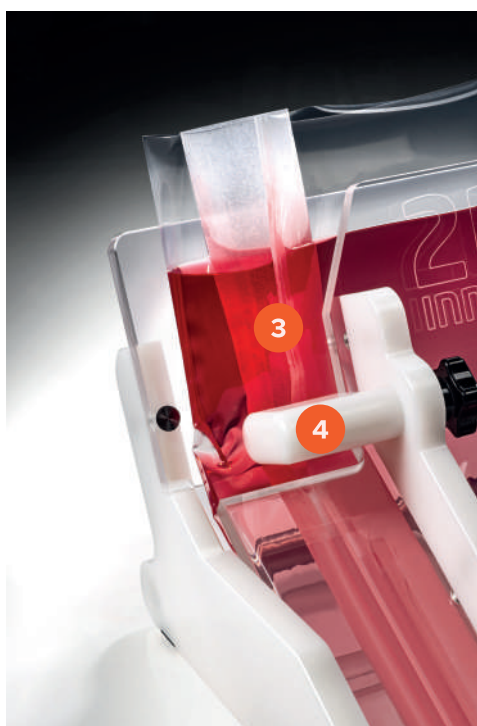

○ Développé et fabriqué en France par 2B Innov

## SPÉCIFICATIONS **TECHNIQUES**

- Socle stable et antidérapant.
- Conçu avec des matériaux durables pour une garantie d'utilisation dans le temps.
- Maintien en position ouvert / fermé par verrouillage mécanique permettant à l'utilisateur de travailler les deux mains libres.
- Réglage de la position de verrouillage permettant une adaptation à tous les volumes (100 ml et 250 ml).
- Nettoyage facile et lavage jusqu'à 70°C

Dimensions	
Largeur	24 cm
Hauteur	17 cm
Profondeur	22 cm
Poids	2.5 Kg



ZI du Felet Rue Edouard  
Michelin Pôle Performance  
63300 Thiers

contact@2binnov.com  
[www.2binnov.com](http://www.2binnov.com)